



CONTACT

[東京] TEL : 03 (3257) 1911 ・ FAX : 03 (3257) 1915  
[大阪] TEL : 06 (6940) 1951 ・ FAX : 06 (6940) 1952

E-mail : eigyou@chuo. co. jp

URL : www. chuo. co. jp


## マッハツェンダー干渉計

### Sales Point 特長

- ▶ マッハツェンダー干渉計は、スペシャルフィルタで拡大された光束をコリメーティングレンズで平行光とします。
- ▶ 最初のビームスプリッタで分割された2光束は光路を往復することなく進み、2つ目のビームスプリッタで重ね合わされます。
- ▶ 一方の光路に試料を入れると試料の状態を示す干渉縞が生じます。

製品番号	製品名	構成ユニット	単価	使用数量	小計
	M: ミラー	SMR-50EA、MHA-50、ES-20-70P、C-05-(8)P、LD-412、BM-65K	¥78,500	2	¥157,000
	BS: ビームスプリッタ	SPBS-S50-400-50、MHA-50、ES-20-70P、C-05-(8)P、LD-412、BM-65K	¥83,500	2	¥167,000
	SF: スペシャルフィルタ	C-48-(3)、OB-40、PH-10、ES-20-70P、C-05-(8)P、LD-412、BM-65K	¥154,500	1	¥154,500
	CL: コリメートレンズ	ACL-25-150M、C-28-25、ES-12-70P、C-05-(8)P、LD-412、BM-65K	¥61,000	2	¥122,000
	SC: スクリーン	スリガラス50×50、FH-60、ES-12-130P、BM-65K	¥52,500	1	¥52,500
	BASE: 定盤	ORE-1890、CVS-200	¥758,000	1	¥758,000
合計					¥1,411,000 (+送料)

※価格には現地調整費は含まれておりません。※LAレーザー光源は別途御見積いたします。

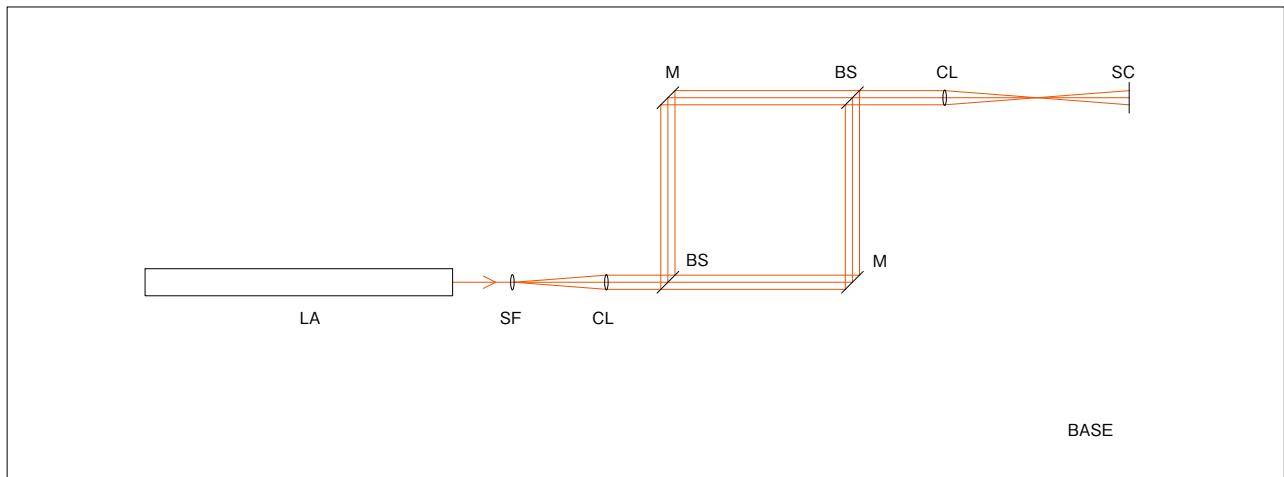

マッハツェンダー干渉計 光学系

オプティカル  
ベース  
オプティカル  
アクセサリ  
オプティカル  
エレメント

オプティカル  
実験セット

干渉計

光学装置