
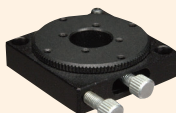
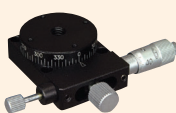
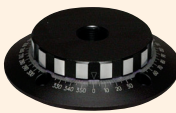
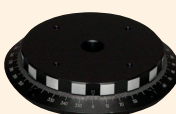
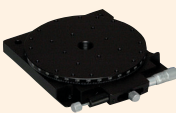
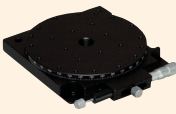
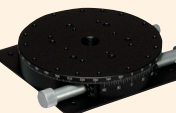


自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 V B 平台
微型平台
螺丝式平台
齿条齿轮 平台
高级平台
细窄平台、 交叉滚柱
Z 升降平台、 Z 平台
旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转 平台
X Z、 Y Z 平台
X Y Z 平台

页	产品参考照片	种类	产品编号		平台面	移动量	备注
			标准千分尺	逆向千分尺			
360		旋转平台	RS-313	-	φ 30mm	粗动 360°	只有粗动
			RS-314T	-	φ 28mm	粗动 360°、微动 ±1.5°	穿透孔
			RS-317	RS-317-R	φ 30mm	粗动 360°、微动 ±5°	细窄式（厚度 15mm）
			RS-612	-	φ 62mm	粗动 360°	只有粗动
362		旋转平台	RS-917	RS-917-R	φ 90mm	粗动 360°、微动 ±5°	细窄式（厚度 20mm）
			RS-112	-	φ 100mm	粗动 360°	只有粗动
			RS-117	RS-117-R	φ 125mm	粗动 360°、微动 ±5°	细窄式（厚度 20mm）
			RS-147-1	RS-147-1R	φ 125mm	粗动 360°、微动 ±5°	细窄式（厚度 20mm）
364		旋转平台	RS-327	-	φ 30mm	微动 360°	齿轮式
			RS-627	-	φ 60mm	微动 360°	齿轮式
			RS-927	-	φ 90mm	微动 360°	齿轮式
			RS-127	-	φ 125mm	微动 360°	齿轮式
			RS-147-2	-	φ 125mm	微动 360°	齿轮式
366		旋转平台	RS-911T	RS-911T-R	φ 90mm	粗动 360°、微动 ±5°	穿透孔
			RS-111T	RS-111T-R	φ 125mm	粗动 360°、微动 ±5°	穿透孔
			RS-211T	RS-211T-R	φ 150mm	粗动 360°、微动 ±5°	穿透孔

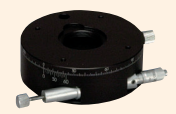


◆ 导向方式

移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）或者配研。

◆ 操作部的标准位置与逆向位置

操作部为千分尺的产品可以选择标准位置与逆向位置。

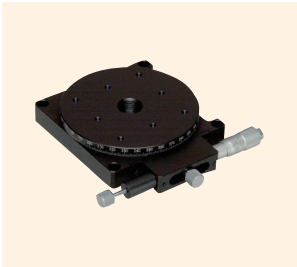

↑ RS-917



↑ RS-917-R

◆ 铝合金制的平台本体

采用铝合金制的平台本体，实现了轻量化。

■ 细窄式

◆ 薄度突出

细窄式的平台本体厚度为 15mm 或 20mm，重叠时重心低的特点十分宝贵。

■ 穿透式

◆ 中心部有穿透孔

平台面的中心有穿透孔，适合在光轴及定心等穿透用途中使用。

※ $\phi 90$ 、 $\phi 125$ 、 $\phi 150$ 的平台穿透孔有螺纹加工。

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 V 型平台
微型平台
螺旋式平台
齿条齿轮平台
高级平台
细窄平台、交叉滚柱、Z 平台
Z 升降平台、旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转平台
X、Y、Z 平台
X、Y、Z 平台


旋转平台

下载




2DCAD


3DCAD

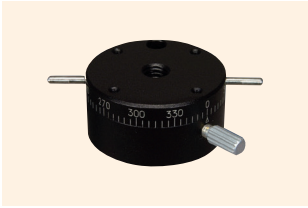

↑ RS-313

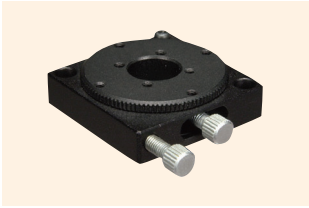

↑ RS-314T

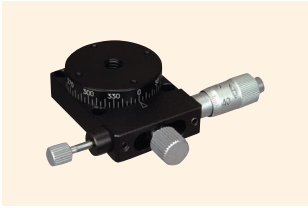

↑ RS-317



↑ RS-612

特


长

Sales Point

- 微动进给的旋转平台。
- 各平台都捏住工作台面，粗动可 360 度旋转。
- 可微动进给的模块，可在粗动夹紧后微动。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。

产 品 编 号	RS-313	RS-314T	RS-317	RS-317-R	RS-612
产 品 名	旋转平台 φ 30	穿透型精密微动旋转平台 φ 30	微动旋转细窄平台 φ 30	微动旋转细窄平台 φ 30（逆向千分尺）	旋转平台 φ 62
移 动 方 向	旋转方向				
平 台 面	φ 30mm	φ 28mm	φ 30mm		φ 62mm
夹 紧 方 式	旋扭螺丝式	复合夹紧			-
操 作 部 安 装 位 置	-		标准位置	逆向千分尺位置	-
微 动 进 给 方 式	-	进给丝杆 P=0.5mm	CEH-6.5R（标准千分尺）		-
移 动 量	粗动 360°	粗动 360°、微动 ±1.5°	粗动 360°、微动 ±5°		粗动 360°
移 动 量 / 旋 扭 1 圈	-	约 2.38°	约 1.36°		-
分 度 值	刻度每格 5°	-	刻度每格 2° / 千分尺式 0.01mm （1 刻度约 0.027°）		刻度每格 1°
移 动 导 轨	配研				
平 行 度	-	0.03mm			-
圆 度	-	-	0.02mm		-
面 摆 动	-	-	0.02mm		-
承 重	19.6N（2kgf）	9.8N（1kgf）			49N（5kgf）
质 量	0.04kg	0.03kg	0.1kg		0.2kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底				

产品的外观图

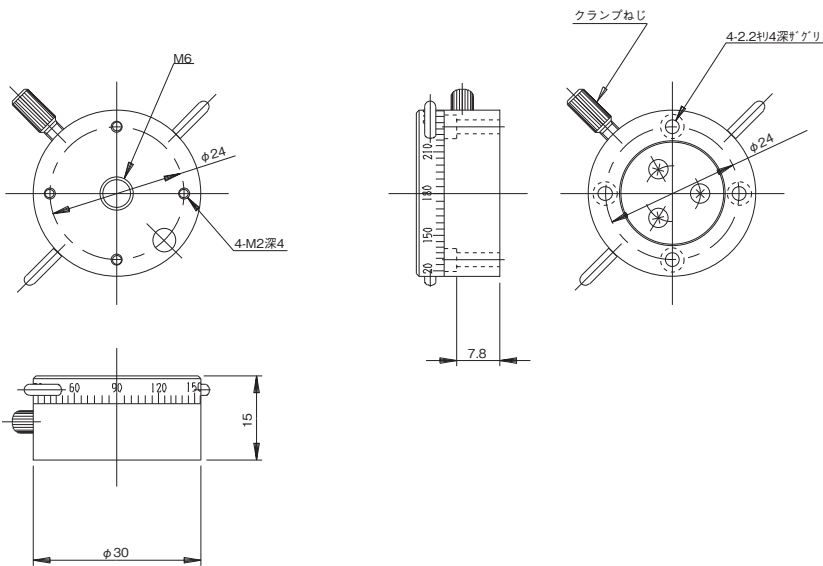


↑ RS-313




旋转平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

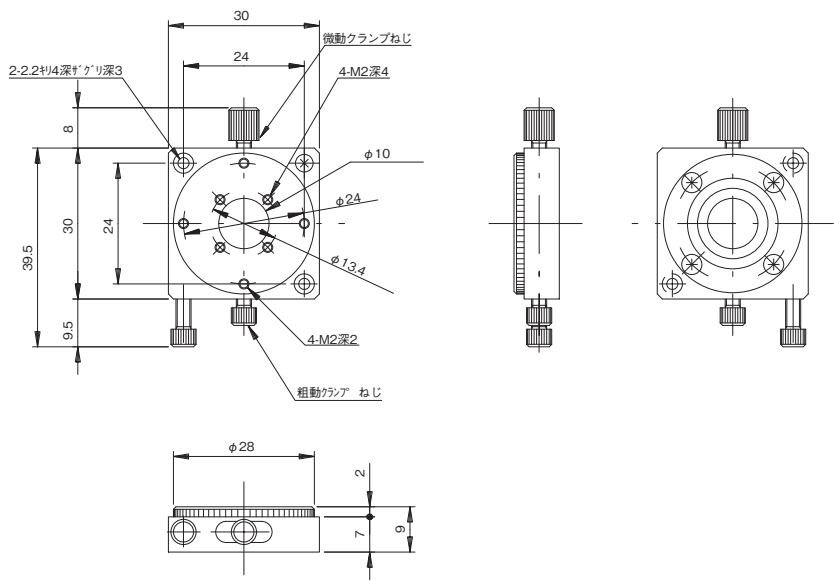

↑ RS-314T

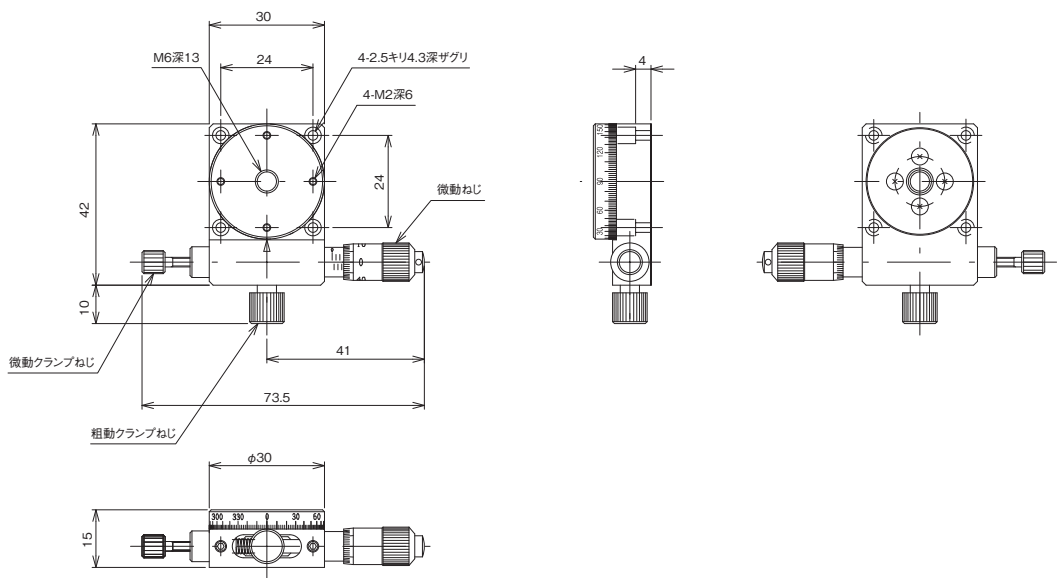

↑ RS-317

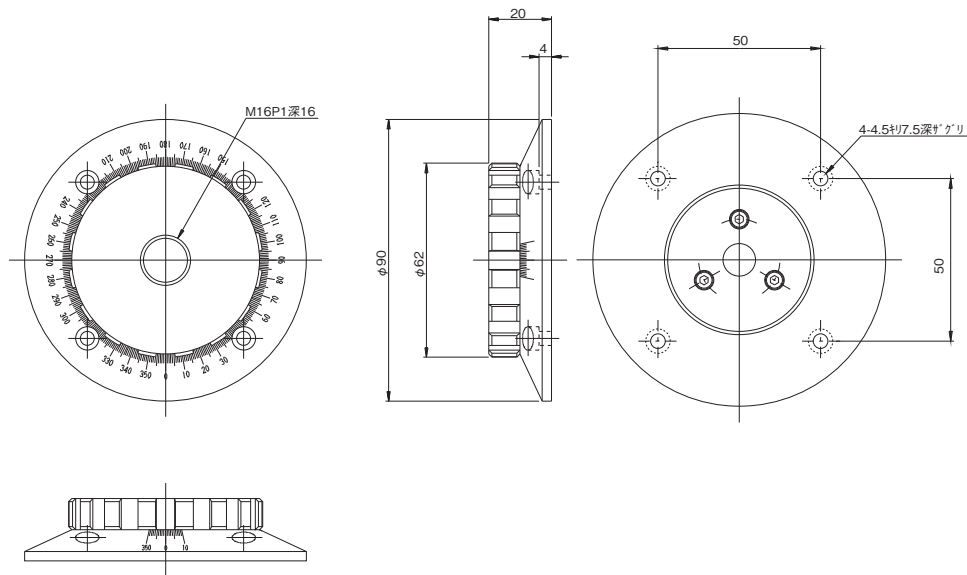

↑ RS-612

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

平台 薄型
V B

微型平台

螺丝式平台

平台 齿条
齿轮

高级平台

平台 细窄平台、
交叉梁柱

Z 平台
Z 升降平台、
旋转平台

倾斜平台

平台 倾斜
旋转

Y X
Z 平台

X Y
Z 平台

旋转平台

下载



2DCAD


3DCAD




↑ RS-917



↑ RS-112

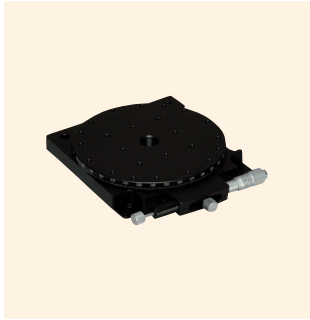

↑ RS-117

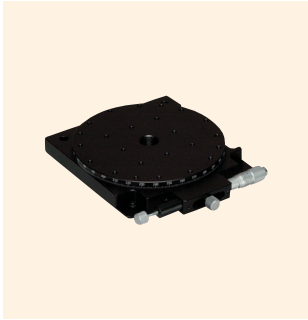

↑ RS-147-1

特 长 Sales Point


- 微动进给方式不同的旋转平台。
- 各平台都捏住工作台面，粗动可 360 度旋转。
- 可微动进给的模块，捏住工作台面，粗动可 360 度旋转。
微动是在粗动夹紧后，用千分尺测微头进行。
- 可微动进给的模块，可在粗动夹紧后微动。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。

产 品 编 号	RS-917	RS-112	RS-117	RS-147-1
产 品 编 号（逆向千分尺）	RS-917-R	—	RS-117-R	RS-147-1R
产 品 名	微动旋转细窄平台 φ 90	旋转平台 φ 100	微动旋转细窄平台 φ 125	
移 动 方 向	旋转方向			
平 台 面	φ 90mm	φ 100mm	φ 125mm	
夹 紧 方 式	复合夹紧	—	复合夹紧	
操 作 部 安 装 位 置	标准位置 ※-R 为逆向千分尺位置	—	标准位置 ※-R 为逆向千分尺位置	
微 动 进 给 方 式	CMH-13RM（标准千分尺）	—	CMH-13RM（标准千分尺）	
移 动 量	粗动 360°、微动 ±5°	粗动 360°	粗动 360°、微动 ±5°	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 0.5°	—	约 0.39°	
分 度 值	副尺每格 5′ / 千分尺式 0.01mm （1 刻度约 0.01°）	刻度每格 1°	副尺每格 5′ / 千分尺式 0.01mm（1 刻度约 0.008°）	
移 动 导 轨	配研			V 型槽与交叉滚柱
平 行 度	0.02mm	—	0.05mm	0.06mm
圆 度	0.04mm	—	0.05mm	0.03mm
面 摆 动	0.02mm	—	0.03mm	0.04mm
承 重	29.4N（3kgf）	98N（10kgf）	29.4N（3kgf）	147N（15kgf）
质 量	0.5kg		0.9kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			




旋转平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

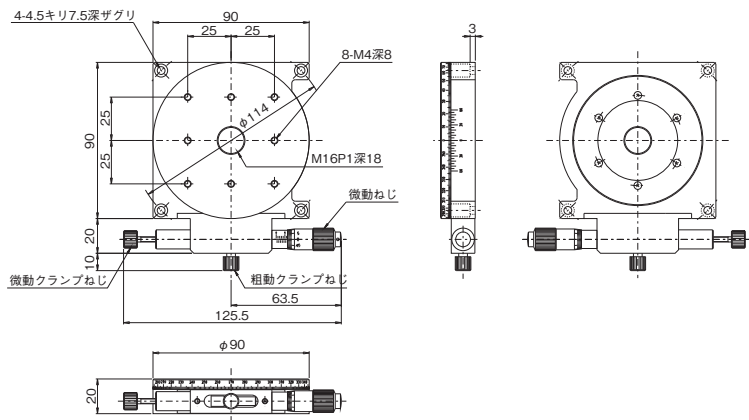


RS-917

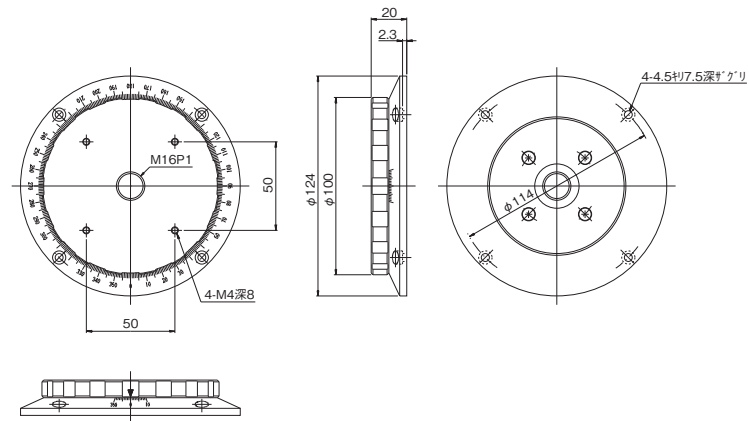

RS-112

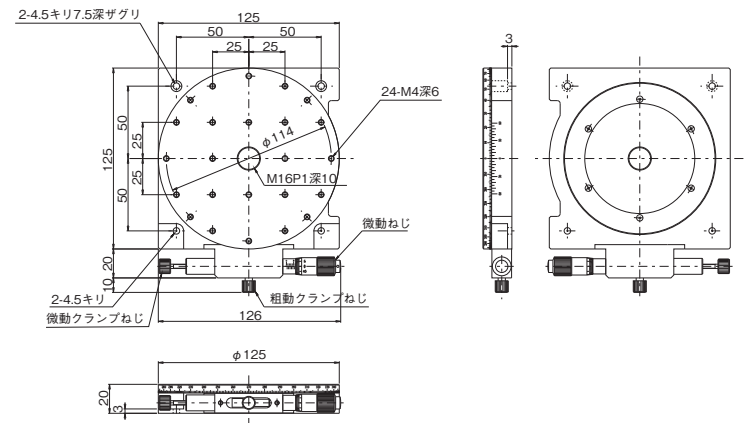

RS-117

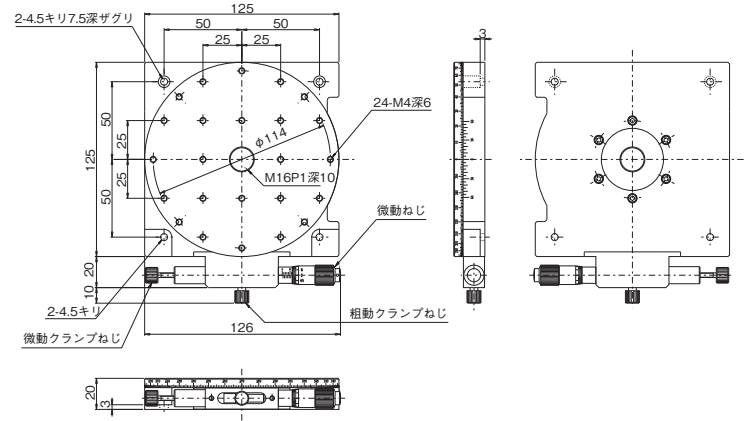

RS-147-1

自动平台	显微镜用 自动化产品	手动平台	平台用附件
固定平台	薄型 V形	微型平台	螺丝式平台
平台	齿条 齿轮	高级平台	细窄平台、 交叉梁柱、 Z升降平台、 旋转平台
平台	倾斜平台	倾斜旋转	X、Y、Z平台
			X、Y、Z平台


齿轮式旋转平台

下载



2DCAD


3DCAD

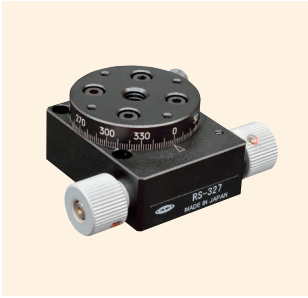


↑ RS-327



↑ RS-627

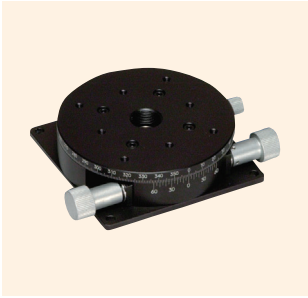

↑ RS-927

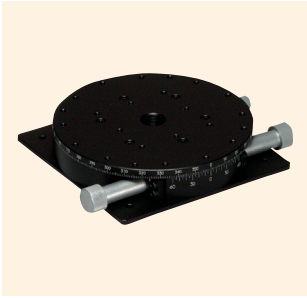


↑ RS-127

特 长 Sales Point

- 进给方式使用蜗杆齿轮的旋转平台。
- 可 360 度微动进给。
- 可在任意位置上夹紧固定。
- 平台面的中心是穿透孔。(RS-327、RS-627 除外)
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号	RS-327	RS-627	RS-927	RS-127	RS-147-2
产 品 名	齿轮式旋转细窄平台 φ 30	齿轮式旋转细窄平台 φ 60	齿轮式旋转细窄平台 φ 90	齿轮式旋转细窄平台 φ 125	齿轮式旋转细窄平台 φ 125（交叉滚柱轴承式）
移 动 方 向	旋转方向				
平 台 面	φ 30mm	φ 60mm	φ 90mm	φ 125mm	
夹 紧 方 式	旋鈕螺丝式				
操 作 部 安 装 位 置	双手轮				
微 动 进 给 方 式	蜗杆齿轮				
移 动 量	微动 360°				
移 动 量 / 旋 鈕 1 圈	约 7.5°	约 6.5°	约 3.5°	约 2.5°	
分 度 值	刻度每格 2°	副尺每格 10′	副尺每格 5′	副尺每格 5′	
移 动 导 轨	配研				V 型槽与交叉滚柱
平 行 度	—	0.03mm	0.05mm		
圆 度	0.08mm	0.04mm	0.05mm		0.03mm
面 摆 动	—	0.02mm	0.03mm		0.04mm
承 重	9.8N（1kgf）	49N（5kgf）			147N（15kgf）
质 量	0.1kg	0.3kg	0.6kg	1kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底				

产品的外观图

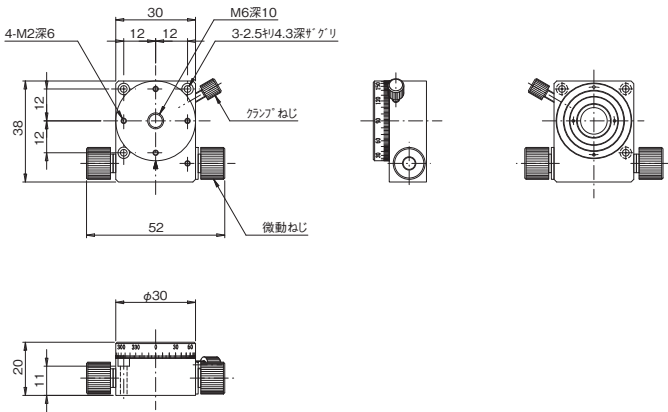


↑ RS-327




旋转平台 ◀ 手动平台 ◀


产品的外观图

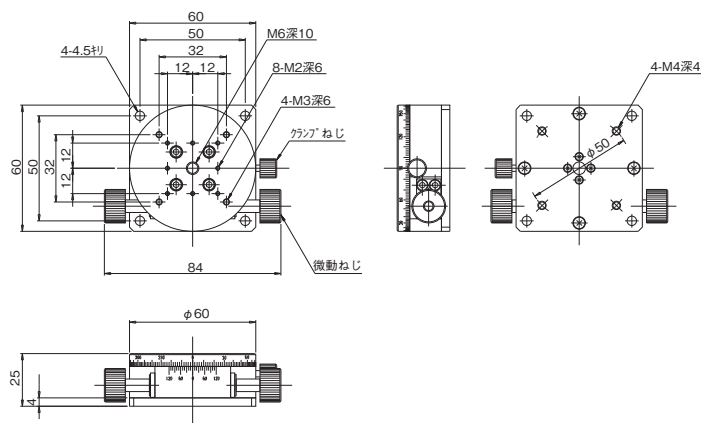


RS-627

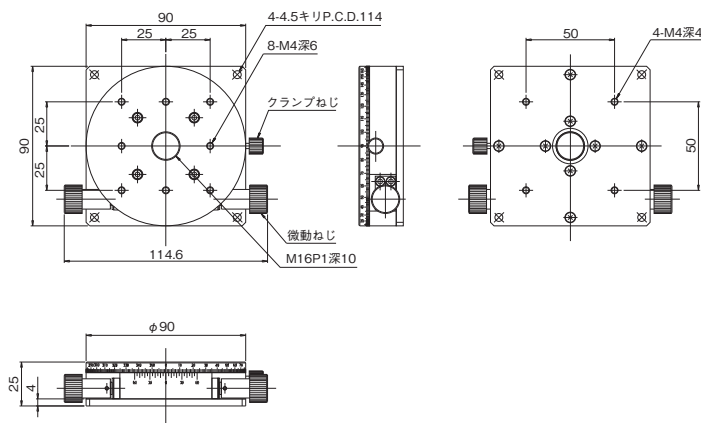

RS-927

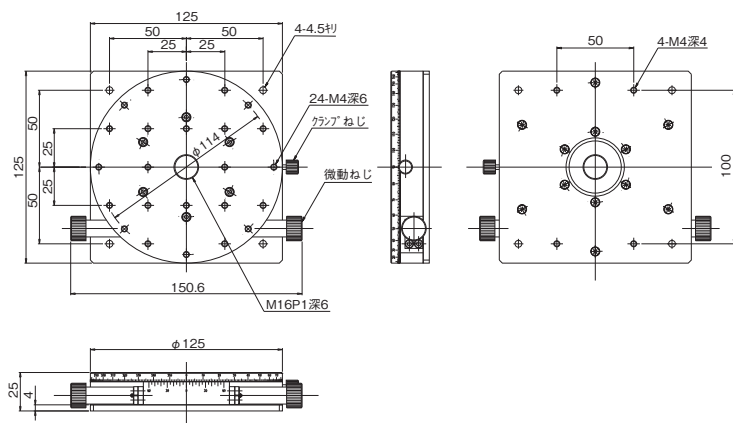

RS-127

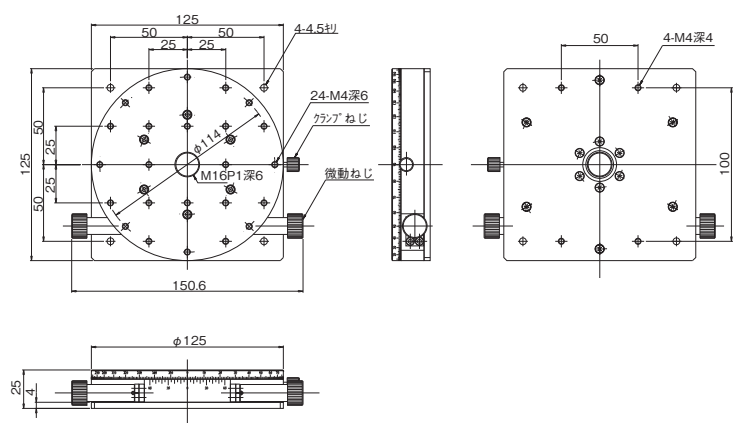

RS-147-2

自动平台	显微镜用 自动化产品	手动平台	平台用附件
固定平台	薄型 V 8	微型平台	螺丝式平台
平台	齿条 齿轮	高级平台	平台
Z 平台	细窄平台、 交叉梁柱、 Z 升降平台、 旋转平台	倾斜平台	倾斜旋转 平台
Y Z 平台	X Y Z 平台		



穿透型旋转平台

下载



2DCAD

3DCAD




↑ RS-911T



↑ RS-111T



↑ RS-211T

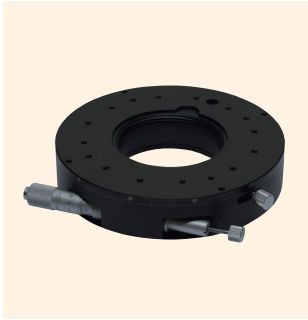

↑ RS-211T-R

特 长 Sales Point


- 移动导轨使用配研的穿透型旋转平台。
- 千分尺测微头的安装有标准（向右）与逆向千分尺（向左）之分，可选择操作方向。
- 捏住工作台面，粗动可 360 度旋转。微动是在粗动夹紧后，用千分尺测微头进行。
- 粗动与微动都夹紧，可在任意位置上固定。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号	RS-911T	RS-111T	RS-211T
产 品 编 号（逆 向 千 分 尺）	RS-911T-R	RS-111T-R	RS-211T-R
产 品 名 称	穿透型微动旋转平台 φ 90	穿透型微动旋转平台 φ 125	穿透型微动旋转平台 φ 150
移 动 方 向	旋转方向		
平 台 面	φ 90mm	φ 125mm	φ 150mm
夹 紧 方 式	复合夹紧		
操 作 部 安 装 位 置	标准位置 ※-R 为逆向千分尺位置		
微 动 进 给 方 式	CMH-6.5FA（标准千分尺）	CMH-13FM（标准千分尺）	MHM1-15（标准千分尺）
移 动 量	粗动 360°、微动 ±5°		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 0.82°	约 0.55°	约 0.46°
分 度 值	副尺每格 5' / 千分尺式 0.01mm (1 刻度约 0.016°)	副尺每格 5' / 千分尺式 0.01mm (1 刻度约 0.011°)	副尺每格 5' / 千分尺式 0.01mm (1 刻度约 0.009°)
移 动 导 轨	配研		
平 行 度	0.05mm		
圆 度	0.05mm		
面 摆 动	0.02mm	0.03mm	
承 重	29.4N (3kgf)		49N (5kgf)
质 量	0.5kg	1kg	1.4kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底		




旋转平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

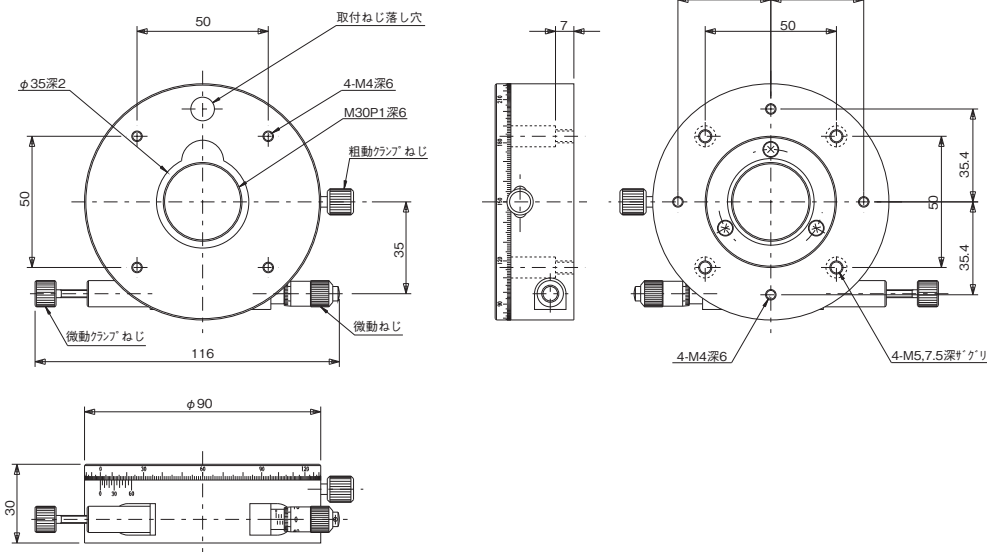

↑ RS-911T

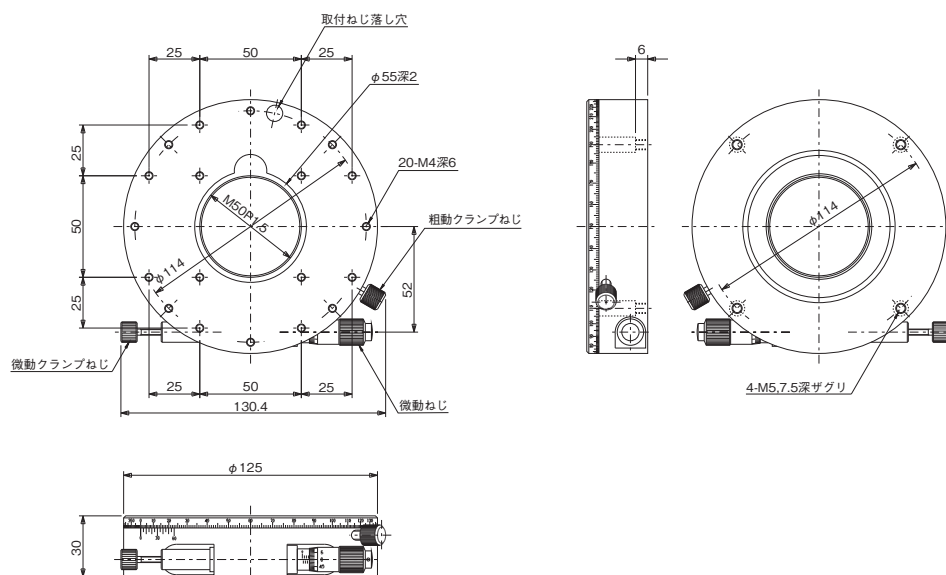

↑ RS-111T

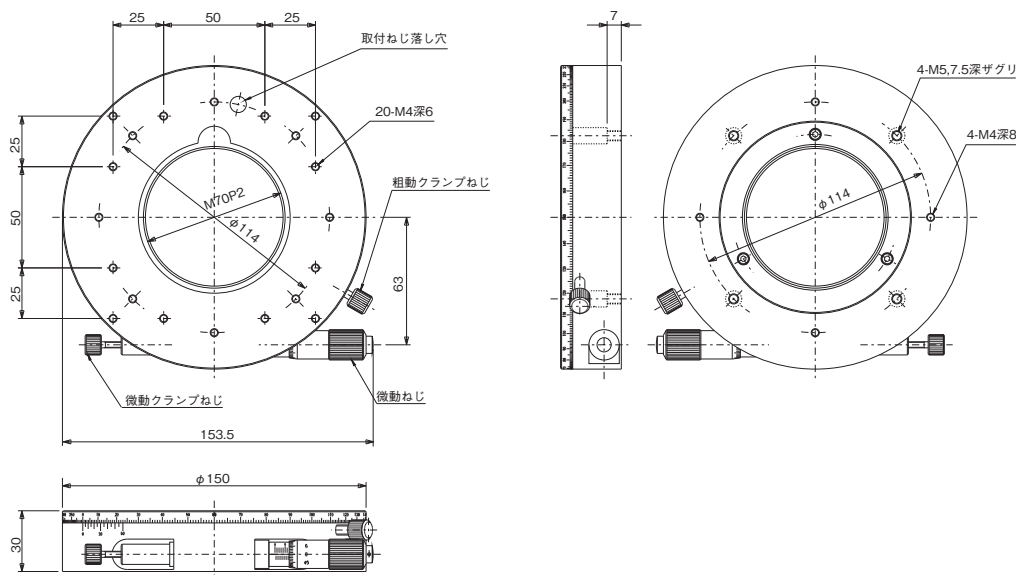

↑ RS-211T

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

平台 薄型
V B

微型平台

螺丝式平台

平台 齿条齿轮

高级平台

平台 细窄平台、
交叉梁柱

Z 升降平台

旋转平台

倾斜平台

平台 倾斜旋转

Y Z 平台

X Y Z 平台